

Stairmax

**SPECJALNY SCHODOŁAZ PRZEZNACZONY DLA
AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW INWALIDZKICH
UMOŻLIWIAJĄCY SAMODZIELNĄ OBSŁUGĘ**





Schodolaz STAIRMAX to wyjątkowe i ekonomiczne z punktu kosztów zakupu i eksploatacji urządzenie do przemieszczania osób na wózkach inwalidzkich po schodach prostych z podestami bez konieczności pomocy drugiej osoby. Dzięki funkcji opuszczania i podnoszenia możliwa jest jazda zarówno po schodach jak i płaskich powierzchniach. Obrót na podestach schodowych jest możliwy dzięki dodatkowym wbudowanym kółkom.



Schodolaz nie wymaga montażu wprowadzania zmian architektonicznych klatki schodowej, uzyskania zgody na użytkowanie. Schodolaz jest praktyczny bezpieczny a jego obsługa jest prosta. Posiada wbudowane, wymienne, bezobsługowe akumulatory.



STAIRMAX oferuje użytkownikowi mobilność, elastyczność zapewniając nową jakość samodzielnej obsługi.






Schodołaz STAIRMAX nadaje się do typowych wózków inwalidzkich z dużym tylnym i małym przednim kołem oraz do niektórych wózków aktywnych. Do obsługi schodołazu wymagana jest motoryczna sprawność użytkownika od pasa w górę oraz sprawność umysłowa. Urządzenie może być dostarczone z nowym wózkiem inwalidzkim lub przystosowane do obecnie używanego wózka inwalidzkiego za pomocą specjalnych adapterów. W celu przystosowania wózka należy go dostarczyć do siedziby dostawcy a następnie wózek wraz ze schodołazem jest dostarczany do użytkownika.

Schodołaz STAIRMAX mieści się w bagażniku samochodu osobowego dzięki czemu może być użytkowany w różnych obiektach. Wraz z urządzeniem jest dostarczana instrukcja obsługi, deklaracja zgodności oraz ładowarka.



Stairmax

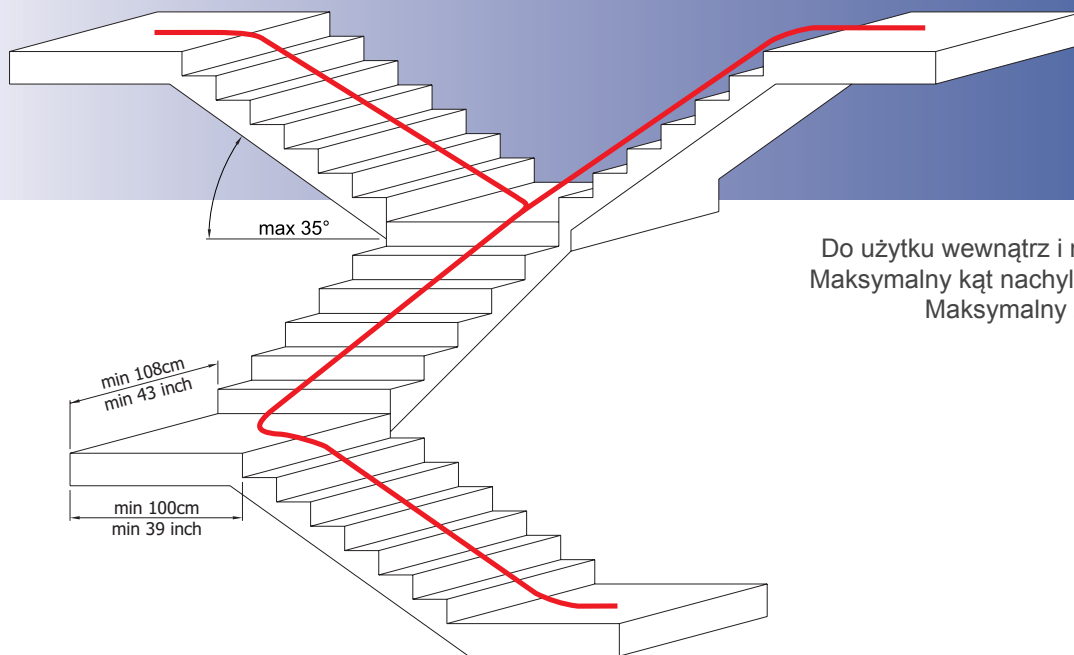

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Maksymalny kąt nachylenia schodów 35 stopni.
Maksymalny zasięg 220 m.

WYMAGANIA DO UŻYTKOWANIA SCHODOLĄZU STAIRMAX:

- Właściwe funkcje ramion, rąk i dłoni użytkownika.
- Pełna sprawność umysłowa użytkownika.
- Zapoznanie się z instrukcją obsługi i szkolenie.
- Schody, po których ma się poruszać, muszą być wyposażone w solidne poręcze.
- Schody proste łączone podestami.
- Wszystkie standardowe i aktywne wózki inwalidzkie z możliwością dostosowania.
- Adaptacja wózka musi być wykonana przez kompetentną osobę.
- Jeśli urządzenie nie jest już potrzebne to może zostać przekazana innej osobie niepełnosprawnej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Maksymalne obciążenie (osoba wraz z wózkiem):	110 kg
Wymiary:	1473 x 635 mm
Waga:	54 kg
Silnik:	12V
Akumulatory:	bezobsługowe 2x6V / 20 Ah
Zasilacz:	4 A
Prędkość jazdy:	w górę 6,5 m/min w dół 7,7 m/min
Maksymalny kąt nachylenia schodów:	35 stopni
Hamulec:	elektro-magnetyczny
Napęd:	gąsiennicowy

Stairmax

OLSKIE ENTRUM IND
www.pcwindy.pl | pcwindy@pcwindy.pl